


7/96-Sf-

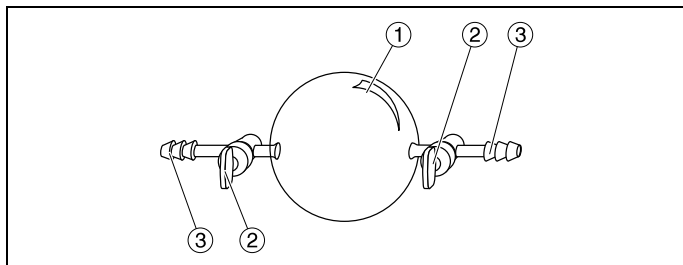

L'appareil sert à déterminer la densité de l'air à partir de la différence de masse entre un ballon plein d'air et un ballon sous vide et à partir du volume évacué.

Bibliographie:

Fichier central pour la démonstration en physique, mécanique (598 611; en allemand)

1 Remarque de sécurité

Manier prudemment le ballon sous vide; pas de choc ni de chute car danger d'implosion.

2 Description, caractéristiques techniques

① Boule de verre, env. 12 cm Ø, volume env. 1 l

② Robinets en verre

③ Olive, Ø ext. 8 mm

Poids: 0,2 kg

3 Utilisation

Matériel supplémentaire nécessaire:

- | | |
|---|---------|
| 1 pompe à vide primaire, p. ex.
pompe à membrane pour vide et
compression | 375 57 |
| ou | |
| trompe à eau | 375 56 |
| o | |
| pompe manuelle pour vide et compression | 375 58 |
| 1 tuyau à vide | 307 68 |
| 1 balance, portée
minimum 250 g, par ex.
balance d'enseignement et de
laboratoire 610 Tara | 315 23 |
| 1 éprouvette graduée, 1000 ml | 665 757 |
| 1 bécher en plastique | 590 06 |
| Recommandé pour l'immobilisation du ballon: | |
| 1 support pour ballon | 667 072 |

Temps d'évacuation:

Pompe à membrane pour vide et compression: 1 min.

Pompe manuelle pour vide et compression: 2 à 3 min. (suivant la fréquence de pompage)

Trompe à eau: 3 min.

Pour déterminer le volume de l'air évacué, plonger l'extrémité du tuyau dans le bécher en plastique rempli d'eau et faire entrer l'eau en ouvrant le robinet (niveau de l'eau dans le bécher au-dessus de celui du ballon).

Mesurer la quantité d'eau écoulée dans le ballon avec une éprouvette graduée.

Pour vider le ballon, ouvrir le second robinet.

Mode d'emploi Instrucciones de Servicio

379 07

Ballon à deux robinets Balón con dos llaves

Fig. 1

Este aparato se emplea para determinar la densidad del aire a partir de la diferencia de masas entre un balón lleno de aire y el mismo evacuado y del volumen del aire extraído con una bomba.

Bibliografía:

Ficheros de tarjetas de Física, Mecánica (598 611, en alemán)

1 Instrucciones de seguridad

Manejar con cuidado el balón evacuado. Peligro de implosión en caso de choque, caída o semejante.

2 Descripción y datos técnicos

① Balón de vidrio, aprox. 12 cm Ø, volumen aprox. 1 l

② Llaves de vidrio

③ Olivetas, diámetro exterior 8 mm

Peso: 0,2 kg

3 Operación

Adicionalmente se requiere:

- | | |
|---|---------|
| 1 Bomba de vacío grueso, por ej.:
Bomba de membrana, de vacío
y de presión | 375 57 |
| o bien | |
| Trompa de agua | 375 56 |
| o bien | |
| Bomba de presión y de vacío de mano | 375 58 |
| 1 Tubo de vacío | 307 68 |
| 1 Balanza, alcance de pesada por
lo menos 250 g, por ej.
Balanza escolar y de
laboratorio 610 Tara | 315 23 |
| 1 Probeta graduada, 1000 ml | 665 757 |
| 1 Jarra de plástico | 590 06 |

Como soporte de objetos esféricos se recomienda:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1 Anillo de soporte | 667 072 |
|---------------------|---------|

Tiempos de evacuación:

Bomba de membrana, de vacío y de presión: 1 min.

Trompa de agua: 3 min.

Bomba de presión y de vacío de mano: de 2 a 3 min. dependiendo de la frecuencia de la bomba

Para determinar el volumen de la cantidad de aire evacuado, sumergir el extremo del tubo de goma en la jarra de plástico llena con agua y abrir la llave para dejar fluir el agua en el balón (nivel de agua en la jarra de plástico - superior al nivel en el balón).

Medir la cantidad de agua afluída con una probeta graduada.

Para vaciar el balón, abrir la segunda llave.